

microlife®



BPHJB2-D
(BP B4 BT)



衛部醫器陸輸字第 001727 號
百略醫學電子血壓計
BPHJB2-D (BP B4 BT)


使用說明書

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用
「本產品涉及個人資料之蒐集、處理及利用，
應遵守個人資料保護法之規範。」


準備

1.  請坐在有靠背的椅子上並保持雙腳平行。
-

2.  避免穿過厚的貼身衣物或是卷成短袖袖子。
-

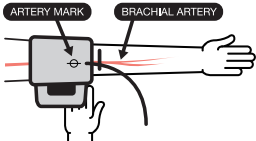3.  請將壓脈帶上 "ARTERY" 的標籤對準您的血管位置。
-

4.  壓脈帶適當地繫在手臂上，並請勿繫太緊。
-

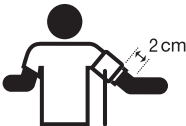5.  請確認壓脈帶位於手肘以上 2 公分的位置。
-

6.  測量期間請勿移動手臂及說話。

每次量測前

1.



30 分鐘內避免進食、洗澡、抽菸及攝取含咖啡因食物。

2.






避免劇烈活動並先休息 5-10 分鐘。

3.





量測前服用藥物可能會影響血壓量測數值。

BPHJB2-D (BP B4 BT)

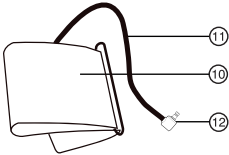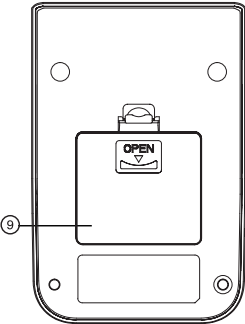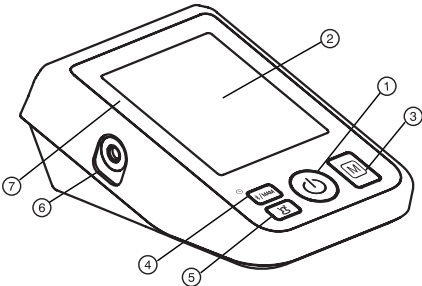

- 18 - A
- 18 - B
- 18 - C

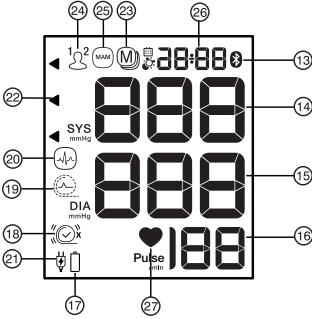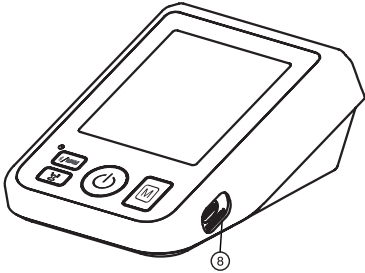

BPHJB2-D (BP B4 BT)

- 1 開 / 關按鈕
- 2 顯示螢幕
- 3 記憶按鍵
- 4 藍牙 /MAM 按鍵
- 5 使用者切換鍵
- 6 壓脈帶插座
- 7 血壓等級標示
- 8 USB Type-C 變壓器插座
- 9 電池蓋
- 10 壓脈帶
- 11 壓脈帶充氣管
- 12 壓脈帶接頭
- 顯示螢幕
- 13 藍牙指示
- 14 收縮壓
- 15 舒張壓
- 16 脈搏
- 17 電池電量指示
- 18 壓脈帶穿戴確認指示
- A：壓脈帶配戴不佳提示
- B：手臂移動提示 (ERR2)
- C：壓脈帶壓力確認提示 (ERR3)
- 19 壓脈帶訊號指示 (ERR1)
- 20 心律不整顯示
- 21 外接電源指示
- 22 血壓等級指示

- 23 儲存數值
- 24 使用者顯示
- 25 MAM 模式
- 26 日期 / 時間
- 27 脈搏指示

百略醫學電子血壓計是測量上臂脈壓的醫學儀器，可適用於 12 歲以上年齡族群使用。

目錄

1. 第一次使用血壓計

- 使用合適的電池
- 設定日期和時間
- 選擇正確的壓脈帶
- 連接壓脈帶與本產品
- 選擇使用者
- 選擇測量模式：標準或 MAM 模式

2. 如何正確的量測血壓

3. 進行血壓量測

- 手動充氣
- 如何讓量測結果不被儲存
- 我該如何評估我的血壓值
- 心律不整偵測 (IHB)

4. 資料記憶

- 過去所有儲存資料的平均血壓值
- 檢視儲存資料
- 清除所有資料

5. 電池電量指示和電池更換

- 電池電力不足
- 電池沒電 - 更換
- 電池類型及規格
- 使用可充電式電池

6. 使用變壓器

7. 藍牙 Bluetooth 功能

8. 錯誤訊息

9. 安全性維護、準確度測試和丟棄處置

- 安全與保護
- 儀器保養
- 清潔壓脈帶
- 準確度測試
- 丟棄處置

10. 技術規格

11. 保固

1. 第一次使用血壓計

使用合適的電池

使用本產品前，應先裝置電池，電池蓋 (9) 位於本產品的底部。將合適的電池 (4 x 1.5 V, AAA 電池) 裝入電池槽後，即可開始設定。

⚠注意：以錯誤的正負極方向安裝電池，可能造成短路並損壞本產品。

設定日期和時間

1. 新電池裝好無誤後，顯示螢幕上的年份數字會閃動。可按 M 按鈕 (3) 來設定你需要的年份。確認年份後，接著按藍牙 /MAM 按鈕 (4) 來設定您需要的月份。
2. 按下 M 按鈕 (3) 來設定月份。確認月份後，接著按藍牙 /MAM 按鈕 (4) 來設定您需要的日期。
3. 請依照上述指示設定日期、小時和分鐘。
4. 設定分鐘並按藍牙 /MAM 按鈕 (4) 後，日期和時間便設定完成，並且會顯示時間。
5. 如果想要變更日期和時間，按住藍牙 /MAM 按鈕 (4) 約 7-8 秒鐘

直到年份數字開始閃動。現在可依照上述步驟輸入新的數值。

⚠注意：請確認本產品上的日期和時間設定正確，若設定錯誤，量測數值將會紀錄在錯誤的時間點。

選擇正確的壓脈帶

原廠提供不同尺寸的壓脈帶，請依據您的上臂圍（以完全包覆上臂中央作為測量標準）選擇適當的壓脈帶尺寸。

壓脈帶尺寸	上臂圍
M-L	22-42 公分

☞ **本產品提供標準配件為軟式壓脈帶 M-L 尺寸，適用臂圍於 22-42 公分。**

⚠注意：本產品僅能使用原廠的壓脈帶及壓脈帶接頭！

⚠注意：使用過大或過小尺寸的壓脈帶量測會造成量測結果不準確，請使用正確尺寸的壓脈帶量測以確保結果的準確度。

如果隨機台附的壓脈帶 (10) 不合您的尺寸，請聯繫您當地的原廠服務中心。

✎ 若有另外購買原廠壓脈帶，請將帶壓脈帶接頭 (12) 從原產品所附的壓脈帶充氣管 (11) 拔下，並將此接頭接上新購買的原廠壓脈帶。

連接壓脈帶與本產品

將帶壓脈帶接頭 (12) 插入壓脈帶插座 (6)。

⚠ 注意：請確保將壓脈帶接頭確實插入本產品的壓脈帶插座，要聽到明顯的“喀”聲響才是確實安裝緊密。

✎ 提醒：壓脈帶接頭未安裝緊密會導致量測結果不準確，會顯示出錯誤訊息 (ERR3)。

選擇使用者

本產品可提供至多兩位使用者使用。

- ▶ 需要切換使用者 1 或使用者 2 時，按下使用者切換鍵 (5)。
- ▶ 在每次量測前，請確保使用者是否

已正確選擇。

選擇測量模式：標準或 MAM 模式

在每次測量之前，選擇標準（單次測量）或 MAM 模式（自動雙次測量）。在 MAM 模式下，本產品將自動連續進行 2 次量測，然後自動分析並顯示結果。因為人體血壓是會持續變動的，以這種方式獲得的結果比起單次測量時更可靠。

- 欲選擇 MAM 模式，請按藍牙 / MAM 按鈕 (4) 3-4 秒鐘，直到顯示螢幕上出現 MAM 符號 (25)。按下 M 按鈕切換開啟和關閉狀態，然後按下藍牙 / MAM 按鈕 (4) 保存設定。
- 螢幕右下方的地方會顯示 1 或 2 代表目前測量的順序編號。
- 前後測量間有 15 秒的緩衝時間。倒數時間代表剩餘的時間。
- 個別的測量結果不會顯示。所有的量測次數都完成後才會顯示您的血壓數值。
- 在血壓量測期間，不要移動壓脈帶。
- 若其中一次測量誤差太大，本產

品會自動進行額外的測量。

2. 如何正確的量測血壓

1. 測量前請避免運動、飲食或抽煙。
2. 測量前請至少在有靠背的椅子上靜坐 5 分鐘並放鬆身體。保持雙腳平放在地板上，不要交叉雙腿。
3. 請務必同一手臂測量（一般為左手臂）。
4. 移除上臂的貼身衣物。為避免手臂緊縮，不應卷成短袖袖子，平整的衣袖並不會干擾壓脈帶的運作。
5. 請確認壓脈帶的正確位置（壓脈帶上有提示）。
 - 套牢壓脈帶，但不宜過緊。
 - 請確認壓脈帶位於手肘以上 1-2 公分的位置，接管則位於手臂內側。
 - 壓脈帶上的 ARTERY MARK(動脈標誌) 3 公分寬必須靠在手臂內側的動脈位置裡。
 - 放鬆手臂。
 - 請確認壓脈帶的高度與心臟同高。

3. 進行血壓量測

1. 選擇標準（單次測量）或 MAM 模式（自動二次測量）：詳細內容請參考章節《1.》。
2. 開始測量：按開 / 關按鈕 (1)。
3. 壓脈帶會自動充氣。測量過程中請放鬆、不要移動或拉緊您的手臂肌肉直到測量結果顯示出來。正常呼吸，不要說話。
4. 顯示螢幕上顯示”壓脈帶穿戴確認指示 (18)”表示壓脈帶穿戴正確。如果符號 (18)-A 顯示，則表示壓脈帶配戴不理想，但仍然可以測量。
5. 當壓脈帶達到正確的壓力時，本產品會停止充氣並且逐漸釋放壓力。如果未達到所需要的壓力，本產品將自動充入更多的空氣到壓脈帶中。
6. 在測量過程中，脈搏指示 (27) 會閃爍顯示。
7. 測量結果的呈現，包括收縮壓 (14)、舒張壓 (15)、脈搏 (16)。請注意本手冊中顯示符號的說明。
8. 完成測量後，取下壓脈帶。
9. 關閉本產品。（本產品會在約 1

分鐘後進入待機狀態)。

⚠注意：量測期間請勿移動或說話，因為講話、移動、抖動或其他震動都可能影響量測結果的準確度！

⚠您可以隨時按下開 / 關按鈕來停止測量（例如您在測量過程中感覺到不舒適的壓力時。）

手動充氣

在使用者有高收縮壓（例如高於 135mmHg）的情況下，可利用獨立設定充氣壓力值來完成測量。請在充氣達到約 30 mmHg（顯示於顯示螢幕上）時，按開 / 關按鈕。按住按鈕直到壓力比預期的收縮壓高出約 40 mmHg – 即可鬆開按鈕。

如何讓量測結果不被儲存

當測量數值一出現在顯示於顯示螢幕時，請快速按住開 / 關按鈕 (1) 直到 M (23) 符號閃爍。確認要刪除測量數值，按下 Bluetooth/MAM 按鈕 (4)。

✍ 刪除成功時，將會顯示《CL》於顯示螢幕上。

我該如何評估我的血壓值

血壓等級指示 (22): 螢幕上的左邊三角標示代表您血壓值所屬的範圍。依指示位置不同，測量讀值會落在正常（黑色）、臨界（灰斜線）或危險（白色）的範圍。

請以較高的數值來評估您的血壓。

範圍	收縮壓	舒張壓	建議
1. 血壓過高	≥135	≥85	請尋求專業醫療建議
2. 血壓略高	130 - 134	80 - 84	自我檢測
3. 血壓正常	<130	<80	自我檢測

請以較高的數值來評估您的血壓。

例如：140/80mmHg 或 130/90mmHg

代表《血壓過高》。

心律不整偵測 (IHB)

心律不整的符號 (20) 出現表示測量過程中檢測到了不規則的脈搏。此種情況下，結果偏離您日常的血壓，您可以再次測試。大多數情況下不需要太過擔心，但如果規律發生類似情形（每天量測血壓，一周出現數次不規則情形），建議您諮詢您的醫師，並且提供以下給醫師的訊息：本產品為振幅探測法血壓計，並能在量測過程

中分析心律不整。

本產品無法取代心臟檢查，若心律不整符號會在量測結束後顯示，且多次頻繁出現心律不整情形（每天量測，一周數次）我們建議您向醫師諮詢。

4. 資料記憶

測量後，2 個用戶可各別存儲 30 個測量值。

按下使用者切換按鈕 (5)，可以切換用戶 1 或 2。

過去所有儲存資料的平均血壓值

按下 M 按鈕 (3)。顯示螢幕會先顯示《M》(23) 及《A》，此時顯示之數值為所有儲存資料的平均值。

☞ 血壓測量結果如果出現 " 壓脈帶配戴不佳提示 " (18-A)，測量數值不納入平均值的計算當中。

檢視儲存資料

再次按下 M (3) 按鈕，會先顯示《M》(23) 及一個數值，例如 M17，這代表總共儲存了 17 組測量結果。

再次按下 M 按鈕，將顯示前一筆測

量資料。

重覆按下 M 按鈕則可查看再下一筆資料。

☞ **請注意本產品的最大存儲容量為 30 筆測量資料。當 30 筆資料均已存滿時，最舊的資料會自動被第 31 筆資料覆蓋。**

清除所有資料

請先確認使用者。如果您確定要永久刪除所有的儲存資料，請在待機狀態下按住 M 按鈕 (3) 直到《CL ALL》出現後放開按鈕。接著在“CL ALL”閃爍時按 MAM 按鈕 (4)。本產品無法清除個別的測量資料。

→ 取消刪除：在“CL ALL”閃爍時按開 / 關按鈕 (1)。

5. 電池電量指示和電池更換

電池電力不足

電池電量耗盡 3/4 時，本產品一啟動量測時便會閃爍低電壓電池符號 (17) (顯示僅有部分電量的電池)。雖然這時本產品還是可以測量，但您應該準備備用電池。

電池沒電 - 更換

電池沒電時，本產品一啟動量測時便會閃爍低電壓電池符號 (17) (顯示無電量的電池)。這時無法再進行測量，必須更換電池。

1. 將本產品背面的電池蓋 (9) 打開，將新電池放入電池槽。
2. 更換電池 - 請務必依電池槽上的極性符號裝入電池。
3. 要設定日期和時間，請依照章節《1.》所述的程式操作。

電池類型及規格

- ☞ 請使用 4 顆全新長效型 1.5V 的 LR3 (AAA) 鹼性電池。
- ☞ 請勿使用過期的電池。
- ☞ 若本產品久置不用，請取出電池。

使用可充電式電池

您也可以使用充電電池操作此設備。

- ☞ 僅可使用“NiMH”型可重複性電池。
- ☞ 當低電壓電池符號 (17) (顯示無電量的電池) 出現，電池必須拆下並重新充電。不要把沒電的電池滯留在本產品內，因為電池可能會受損壞。
- ☞ 如果一周或更長時間不打算使用本產品，請務必取出充電電池。

- ☞ 電池無法在本產品量測血壓同時充電。使用外部充電器來充電並注意有關充電、保養及耐用性等訊息。

6. 使用變壓器

您可使用原廠專用的變壓器 (DC 5V, 1A) 來操作本產品。

- ☞ 請只能使用原廠變壓器



請確認變壓器或接線沒有損壞。如有損壞，請立即關掉電源並移除變壓器。



僅在符合電壓規格的插座上使用此變壓器。



雙手潮濕時，請勿伸手將變壓器從插座移除。



此變壓器不防水，請勿將液體潑灑到變壓器上。

- ☞ 提醒：若使用變壓器，會建議將電池取出，以防止電力耗盡。
- ☞ 提醒：當產品偵測到變壓器，螢幕會

顯示出外接電源指示 (21)。

1. 請將變壓器接線端插入血壓計的變壓器插座 (8) 中。
2. 請將變壓器插頭插入牆壁插座內。

7. 藍牙 (Bluetooth) 功能

本產品的藍牙功能可與有安裝 <<Microlife Connected Health+>>APP 的智慧行動裝置連結。(行動裝置作業系統: Android OS 或 iOS) 本軟體只搜集、儲存、顯示用於健康管理, 不涉及疾病診斷。

- 手動開啟藍牙: 按下 Bluetooth/MAM 按鈕 (4) 啟動藍牙, 顯示幕上的藍牙符號 (13) 將會閃爍。
- 自動開啟藍牙: 藍牙將在測量後自動啟動。顯示幕上的藍牙符號 (13) 將會閃爍。
- 手動關閉藍牙: 按 ON/OFF 按鈕 (1) 關閉藍牙。
- 自動關閉藍牙: 如果智慧型手機未連接到本產品, 藍牙將在 2 分鐘後自動關閉。

首次使用請於行動裝置安裝

<<Microlife Connected Health+>>APP 並進行藍牙配對, 配對方式請見以下說明。

藍牙連接與配對

1. 開啟智慧型手機上的《Microlife Connected Health+》應用程式 (確保應用程式在前台運行, 而不是在背景運行。)
2. 按下 Bluetooth/MAM 按鈕 (4) 將裝置連接到智慧型手機。
3. 當智慧型手機找到裝置時, 智慧型手機將顯示與裝置配對的訊息。在智慧型手機上確認以完成配對。取消以終止配對。
4. 配對後, 應用程式將顯示一則訊息, 要求選擇裝置使用者 (1 或 2), 會設定到應用程式的使用者檔案中。確認以繼續設定。取消以終止設定 (如果使用者選擇不正確)。
5. 設定後, 本產品將自動傳輸測量資料和日期 / 時間設定至應用程式。數據傳輸成功後, 藍牙會自動關閉。

藍牙狀態

- 藍牙符號 (13) 緩慢閃爍：藍牙已啟動並等待連線。
- 藍牙符號 (13) 不閃爍：藍牙連線已建立。
- 藍牙符號 (13) 快速閃爍：藍牙連線錯誤。

🔑 如果藍牙連線錯誤，請關閉裝置藍牙，等待一分鐘，然後重新嘗試藍牙連線。參見章節 <<8. 錯誤訊息 >> 了解詳細資訊。



注意：確保本產品上的日期和時間設定正確。不正確的設定會使測量數據和時間記錄被誤導。

8. 錯誤訊息

測量時若發生錯誤，測量便會中斷並顯示錯誤訊息，如“ERR3”

錯誤	說明	可能原因和解決方式
<ERR 1> (19)	訊號太弱	壓脈帶的脈衝訊號太弱。請重新調整壓脈帶的位置再測量。*

<ERR 2> (18)–B	錯誤訊號	在測量時，壓脈帶會偵測出因手臂移動或肌肉張力而產生的錯誤訊號。請再測量一次，手臂保持靜止狀態。
<ERR 3> (18)–C	壓脈帶充氣不正常 	壓脈帶內無法產生足夠的壓力，可能是有漏氣的情形，請檢查壓脈帶是否有緊密接好，必要時請更換電池，然後再測量一次。 注意： 請確保將壓脈帶接頭確實插入本產品的壓脈帶插座，要聽到明顯的“喀”聲響才是確實安裝緊密。
<ERR5>	異常的結果	因測量訊號不正確而無法顯示結果。請詳讀並執行有效測量的要點，然後再測量一次。*

<ERR6>	M A M 模式	MAM 模式下測量出現太多錯誤訊息，因此無法演算出可信任的最終結果。請詳讀並執行有效測量的要點，然後再測量一次。*
<HI>	脈搏或壓脈帶壓力過高	壓脈帶的壓力過高（超過 299mmHg）或脈搏過高（每分鐘超過 ≥ 200 次）。請休息 5 分鐘後再測量一次。
<LO>	脈搏過低	脈搏過低（每分鐘不到 < 40 次）。請再測量一次。
	藍牙符號 (13) 快速閃爍	如果藍牙連接錯誤，關閉裝置藍牙並關閉智慧型手機上的應用程式。等待 1 分鐘，打開智慧型手機上的應用程式並手動啟動裝置上的藍牙，以重試藍牙連接和資料傳輸。

<ERR bt>	藍牙白檢錯誤	藍牙故障。請聯絡您當地的原廠經銷商。
----------	--------	--------------------

* 若以上任一情況持續發生，請諮詢專科醫師。

9. 安全性維護、準確度測試和丟棄處置

⚠️ 安全與保護

- 請依照指示操作本產品。本說明書提供關於本產品重要的操作及安全資訊。請在使用前詳閱本說明書，並且妥善保存。
- 本產品僅供說明書內提及的用途使用。製造業者對本產品不當使用所造成的損壞一概不負責。
- 本產品內含精密元件，必須謹慎處理。存放和操作條件請遵照“技術規格”章節中的說明。

請勿讓本產品：

- 接觸水或受潮
- 暴露在極端溫度下
- 受到撞擊或摔落
- 沾染灰塵
- 受到陽光直射

- 處於過冷或過熱環境

- 壓脈帶結構精密，必須謹慎處理。
- 請勿使用非本產品專用的壓脈帶或是接頭。
- 裝上壓脈帶後才可充氣。
- 若發覺本產品損壞或發生不正常，請勿再使用本產品。
- 請勿企圖拆開本產品。
- 久置本產品不用時應先取出電池。
- 請詳讀手冊內各章節的詳細安全說明。
- 本產品的測量結果無法作為診斷使用。測量結果不能用來取代專科醫師的諮詢判斷，尤其是結果與使用者病徵不符合時。不能只仰賴本產品測量結果，請注意其他潛在的病徵及使用者主觀的反饋。如果有需要，請通知醫師或救護車。
- 長期的高血壓可能破壞您的身體健康，請諮詢專科醫師的協助。
- 請與您的專科醫師討論測量結果，如果您發現任何不尋常或不確定的徵兆，請讓醫師知道。不要僅仰賴單次血壓量測的結果。
- 在諮詢醫師之前，不要隨意自行變更您使用藥物的劑量，或是開始任

何療程。

- 由於量測當下的情境完全不同，由醫師、藥局及在家測量的血壓值出現偏差值是正常的。
- 脈搏的測量無法用於確認心臟起搏器的頻率！
- 如果您懷孕了，建議您定期監測您的血壓，懷孕期間血壓變化較大。



請勿讓兒童擅自使用本產品；有些小零件會造成吞食的危險。本產品含有長條線狀配備，請注意不要讓兒童被線狀配備纏繞而造成窒息。

儀器保養

請以乾軟的布擦拭本產品表面的灰塵或髒汙。

清潔壓脈帶

請小心以濕布沾肥皂水擦拭清除髒汙，並在陰涼處自然風乾。

⚠警告：無論在任何情況下都不得清洗“壓脈帶”。

準確度測試

我們建議本產品每兩年或機體受到撞擊（如摔落）後需進行一次準確度的測試。如需校正，請洽詢原廠維修中心安排測試（請參閱前言）。

 **請勿自行校正本產品。**

丟棄處置



丟棄電池或電器時需遵照當地的相關法規。不包括家居廢物。

10. 技術規格

- 產品型號：BPHJB2-D (BP B4 BT)
- 操作環境：溫度 10° C~40° C / 50 ~ 104 ° F; 15%~90% 最大相對濕度
- 儲存溫度：溫度 -20~+55° C / -4~+131° F; 15~90% 最大相對濕度
- 重量：260g (包含電池)
- 機體尺寸 (mm)：141 (長) x 94.5 (寬) x 56 (高)

- 測量方法：振幅探測法（第一相為收縮壓、第五相為舒張壓）
- 測量範圍：收縮壓 60~255 mmHg; 舒張壓 40~200mmHg
- 脈搏（每分鐘）40~199 次數 / 分鐘
- 壓脈帶壓力顯示範圍：0 - 299 mmHg
- 解析度：1mmHg
- 靜態壓力準確度：壓力於 ± 3 mmHg 之間
- 脈搏準確度： $\pm 5\%$ 的測量值
- 通訊方式：低功耗藍牙
- 電源：4 顆 1.5V LR3 (AAA) 鹼性電池；
- 變壓器：(選購品)
- 輸入：100~240V; 輸出：DC 5V, 1A, 5W
- 電池使用壽命：大約 400 次量測（使用新電池）
- 防水等級：IP21 (防止直徑大於 12.5mm 的固體外物完全侵入箱體內)，垂直落下的水滴不應造成有害影響。

11. 保固

本產品具有3年保固(自購買日算起)。保固效力需憑經銷商認可並含購買日期和收據的保證卡。

- 保固不含電池。
- 壓脈帶保固期為1年。
- 任意打開或拆裝本產品，將使保固無效。
- 保固不含因不當處理、電池放電、意外情形或未遵照操作說明而導致的儀器損壞。

保固服務請洽詢Microlife 總代理商
(請參閱前言)。

符號和定義

	使用前請詳細閱讀本使用說明書。		製造業者
	表示此產品為內部電源類 BF 型應用部份設備。		製造國家 / 地區 (如果符號旁邊印有日期, 則為製造日期)
	注意		歐洲符合性標誌
	醫療器材		溫度限制
	型號		濕度限制
	參考型號		丟棄電池或本產品時需遵照當地的相關法規 (不包括家居廢物)。
	不防水, 請保持乾燥		遠離兒童
	序號		遠離陽光
	批號		患者資訊網站
	單一識別碼		提醒 / 注意事項
	不是用天然橡膠乳膠製成的		符合 NCC 電信法的認證符號。 型號: BPHJB2-D (BP B4 BT) 證號: CCAM25LP0570T8

無線設備警告聲明

根據 NCC LP0002 低功率射頻器材技術

規範_章節 3.8.2：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

醫療器材商名稱：

百略醫學科技股份有限公司

醫療器材商地址：

台北市內湖區瑞光路 431 號 9 樓

製造業者名稱 / 地址：Manufactured by ONBO Electronic (Shenzhen) Co., LTD. (地址：No.138, Huasheng Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China) for UAB “Microlife” (地址：P. Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius, Lithuania)